

CIRCAID[®]

Justerbare kompressionsstrømper og -ærmer

ApodanNordic
HEALTHCARE

ApodanNordic HealthCare A/S
Lergravsvej 63 | DK-2300 København S.
www.apodan.dk | Mail: info@apodan.dk
Tlf: 3297 1555 | Fax: 3297 2101

Bag om CircAid®

Du holder dig måske ikke vågen hele natten, fordi du undrer dig over hvordan giraffer kan have et venøs tryk på mere end 250 mmHg ved deres ankler. Trykket er ca. tre gange så højt som hos mennesker, og alligevel får giraffer aldrig lymfødem eller venøse lidelser. Fysiologer fandt svaret: Hemmeligheden ligger i huden. Giraffens hud er ikke elastisk og kan ikke strækkes. Det vil sige, at huden ikke kan strække sig for at imødekomme trykket fra ødem. Derfor er giraffen ikke modtagelig for problemer som lymfødem og venøs sygdomme, og dét selv om giraffen kan være på benene 24 timer i døgnet. CircAid® Medical Products, anvendes det samme princip til mennesker.

Kombination af enkelhed og videnskab

Man kan undre sig over hvordan en række ikke-elastiske "bånd", vil hjælpe lymfødem patienter til at få det bedre, men de ikke-elastiske bånd er netop nøglen hertil.

CircAid® produkter er komfortable og åndbare. Båndene fikses med velcro, og de er justerbare. Derfor kan patienterne opretholde det korrekte niveau af kompression, selv når ødemet ændrer sig og/eller under fysisk aktivitet. Båndene leverer også et graderet modtryk, hvilket giver bedre cirkulation. Når den menneskelige hud støttes med et CircAid® system, med ikke-elastiske justerbare bånd, leverer CircAid® den samme vedvarende kompression, som giraffen besidder naturligt.

Dette er principperne bag CircAid® systemet. Det lyder umiddelbart simpelt, men CircAid® systemer er i virkeligheden meget videnskabelige og tilbyder en unik kombination af fysik og fysiologi.

CircAid® produkterne er per definition uelastiske, hvilket medfører en fordelagtig kompression i forbindelse med ødemer.

	Ikke elastisk		Elastisk	
	Uelastisk minimal stræk	Kort stræk	Langt stræk	
Maksimalt stræk på 10 Newton/cm i bredden	0 - 10 %	10 - 100 %	> 100 %	

Kilde: International Compression Club directed by Hugo Partsch (ICC).

Indikationer

- Lymfødem
- Andre typer af ødemer: Venøse, post-traumatiske, post-operative
- Varicer (alle typer)
- (Kronisk) Venøs insufficiens
- Venøs Valvular insufficiens
- Post-thrombotisk syndrom
- Venøse sår
- Angiodysplasi
- Post-Sclerotherapy
- Trombose profylakse

Absolutte kontraindikationer

- (kompression må aldrig bruges)
- Alvorlig perifer arteriel lidelse
 - Inkomenseret morbus cordis
 - Septisk flebitis
 - Phlegmasia cerula dolens (næsten total venøs trombose af et ben)

Relative kontraindikationer

- (kompression må kun anvendes med forsigtighed)
- Nedsat eller ingen følelse i ben/arm
 - Allergi overfor kompressionsmaterialerne
 - Moderat perifer arteriel lidelse
 - Infektion i ben/arm

Comfort CoverUp: Overtræksærmer

Indikation:

- Anvendelse ovenpå Juxta-Fit Arm - eller benkompressionsstrømpe

CoverUp egenskaber:

- Forebygger at velcro hænger i andet tøj
- Skjuler kompressionsærmer/strømper

En pakke indeholder:

- 1 Comfort CoverUp arm eller
- 1 Comfort CoverUp til underben eller
- 1 Comfort CoverUp til hele benet
- Brugervejledning

Comfort CoverUp farver:

- Arm: beige (standard til Juxta-Fit),
 sort (standard til Graduate arm, valgfri til Juxta-Fit)
 pink (valgfri til Juxta-Fit)
- Ben: beige (standard til Juxta-Fit),
 sort (valgfri til Juxta-Fit)



Comfort CoverUp (max omkreds måles med CircAid på)	S	L
Arm	26-39 cm	40-60 cm
Underben	34-50 cm	51-80 cm
Hele benet	50-71 cm	72-108 cm

Comfort Non-Slip

Indikation:

- Forebygger nedskridning af kompressionsstrømper eller bandager

Comfort Non-Slip egenskaber:

- Skridsikkert behageligt materiale
- Genanvendelig

En pakke indeholder:

- 1 Comfort Non-slip 46 x 76 cm eller
- 1 Comfort Non-slip 46 x 152 cm
- Brugervejledning





Juxta-Fit Arm kompressionsærme

Indikationer:

- Lymfødem
- Lipødem

Juxta-Fit egenskaber:

- Køligt, letvægts, åndbart Breathe-O-Prene® materiale
- Patenteret Juxta-Lock™ båndsystem letter påtagning
- Anti-lugt SILVERtec™ foring
- Graderet båndsbred kompression
- Uelastisk materiale sikrer optimal kompression hele døgnet
- Maskinvaskbar - 30°C - skal lufttørre
- 6 måneders garanti

Juxta-Fit Armsystem indeholder:


- 1 Juxta-Fit Arm strømpe
- 1 Comfort CoverUp™ overtræksærme
- Brugervejledning

Tilbehør bestilles separat:

- Juxta-Fit håndomslag
- Juxta-Fit handske
- Ekstra CoverUp™ overtræksærmer (sort, beige eller pink)
- Ekstra Albue stykke

Størrelser:

Juxta-Fit arm - og handske fremstilles kun efter mål.
Håndomslag findes i standard størrelser.

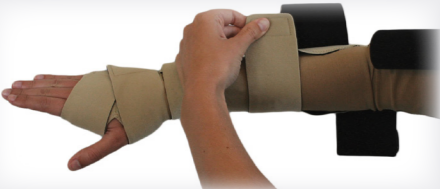

Juxta-Fit Handske



Juxta-Fit Håndomslag

Håndomslag: mål omkreds af hånd ved basen af tommelfinger

Standard	14-17cm	17-20cm	20-23cm	23-26cm	26-29cm
Str.	XS	S	M	L	XL

Videoklip og Måleskemaer findes på www.circaid.dk

Juxta-Fit™

Standard og Specialfremstillede størrelser

Indikationer:

- Venøs insufficiens
- Ulcus cruris
- Lymfødem
- Lipødem

Juxta-Fit™ egenskaber:

- Blød og behagelig pasform
- Åndbart Breathe-O-Prene™ materiale
- Anti-mikrobiel, anti-statisk, anti-lugt
- Hurtig og nem at anvende og aftage
- Let at justere under brug
- Lidt til ingen nedskridning
- Kan benyttes 24 timer i døgnet
- Termodynamisk
- Maskinvaskbar ved 30°C. Skal lufttørre
- 1 års garanti

Juxta-Fit™ system indeholder:

- 1 Juxta-Fit™
- 1 ankel wrap
- 2 (sølv) inderstrømper
- Brugsanvisning
- Til modeller i fuld benlængde leveres tillige; 1 Comfort CoverUp™ og 1 Comfort Non-Slip Liner™

Tilbehør - Bestilles separat:

- Juxta-Fit™ AB foddel
- Terapeutisk elastisk ankelstrømpe (Anklet AB)
- Ekstra inderstrømper, eller Comfort CoverUp™ (sort eller beige)

Størrelser:


Standard: Fås kun i ankel til knæ (BD) – i 8 størrelse og 2 længder.
Specialfremstillede: Kan laves efter mål til hele benet.



Juxta-Fit™ BD & Juxta-Fit™ AB



Inkl. ankel wrap

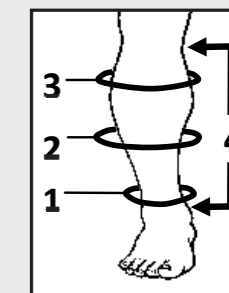

Standard		S	M	M-C+	L	L-C+	XL	XL-C+	XXL
3	Omkreds 25 cm over centrum af medial malleol	30-38	36-43	43-50	41-48	48-56	46-56	51-61	53-64
2	Omkreds 15 cm over centrum af medial malleol	20-28	25-33	33-40	30-38	38-46	36-46	41-51	43-53
1	Omkreds 5 cm over centrum af medial malleol	15-23	20-28	20-28	25-33	25-33	30-38	30-38	33-41
4	Længde fra centrum af medial malleol til knæhase	Alle mål er i cm. Standard længde = 28 og 36 cm							

Videoklip og Måleskemaer findes på www.circaid.dk

Juxta-Fit™ AB

- Separat justerbar neopren kompressions foddell



Anklet AB

- Elastisk ankel kompressionsstrømpe



Foddell med lukket hæl



Foddell med åben hæl

Juxta-Fit™ AB - Bestilles separat
Standard størrelser og Specialfremstillede størrelser

Indikationer:

- Venøs insufficiens
- Ulcus cruris
- Lymfødem
- Lipedema

Juxta-Fit™ AB egenskaber:

- Blød og behagelig pasform
- Åndbart Breathe-O-Prene™ materiale
- Anti-mikrobiel, anti-statisk, anti-lugt
- Hurtig og nem at anvende og fjerne
- 1 års garanti

Juxta-Fit™ AB systemet indeholder:

1 Juxta-Fit™ AB foddell


Brugsanvisning

Størrelser:

Foddell med åben hæl fås kun i standard størrelser.

Foddell med lukket hæl fås i standard størrelser og specialfremstillet.

	Standard	S	M	L
1		> 9 cm	> 9 cm	> 9 cm
2		19-24 cm	24-29 cm	29-34 cm
3		< 36 cm	< 36 cm	< 41 cm
4 Åben hæl		13-25 cm	13-25 cm	13-25 cm
4 Lukket hæl		> 16 cm	> 16 cm	> 16 cm

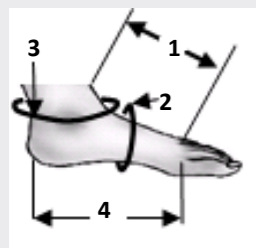

Videoklip og Måleskemaer findes på www.circaid.dk

Tilbehør:

inderstrømper kan anvendes alle CircAid modeller (og under Lympha Press Manchetter).

Strømperne findes i str. Small-XXL.

Vare Nr.	Model Nr.	Navn	Indholdsstoffer
024583	7613	Strømpe til Ben AD (par)	Bomuld, Lycra
024584	8146	Strømpe til Ben AG (par)	Bomuld, Lycra
024588	8147	Strømpe til Ben m sølv AG (par)	Bomuld, Lycra, Nylon, Sølvbetrukket Nylonfibre
024589	7616	Strømpe til Ben, to lag AG (par)	Bomuld
024597	7645	Ærme m. hul til tommelfinger (stk.)	Bomuld, Lycra, Nylon



Anklet AB

Standard og specialfremstillede størrelser

Kompression klasse 2 og 3. Specielt udviklet til håndtering af venøse og lymfatiske ødemer. Kan anvendes i kombination med CircAid justerbare kompressions strømper, som f.eks.:

- Juxta-Lite™
- Juxta-Fit™
- Ready-Fit™ 2000
- Ready-Fit™ Flex

Anklet AB's egenskaber:

- Let at anvende
- Meget blød strik
- Behagelig pasform
- Allergitestet
- Kan maskinvaskes ved 40°C. Skal lufttørre
- 6 måneders garanti


Anklet AB standard pakke indeholder:

- 2 kompressions ankelstrømper
- Brugsanvisning

Størrelser:

Fås i 5 standard størrelser i 2 længder, samt i specialfremstillede mål.

Omkreds mål		S	M	L	XL	XXL	Specialfremstillet
cB	smalleste omkreds omkring anklen, målt så lavt som muligt.	16-19	19-23	23-28	28-34	34-41	15-42
cY	omkreds ved forsvang måles med fod i maksimal dorsal fleksion.	30-36	31-37	32-38	33-39	34-40	24-43
cA	fodomkreds ved roden af storetåen, ved det bredeste sted på forfoden.	21-25	21.5-25.5	22-26	22-27	22.5-27.5	17-31
Længde mål		Normal	Lang				
Total	Total længde fra gulv til øverste kant på strømpen	13.5-14.5	14.5-15.5				
/B	længde fra gulvet til cB, målt på indersiden af foden	11-12	12-13				
/A	længde fra hæl til roden af tæerne (cA) - målt på indersiden af foden	17-19	19-21				
/Z	total fodlængde fra hæl til spidsen af tæerne	23-26	25-28				

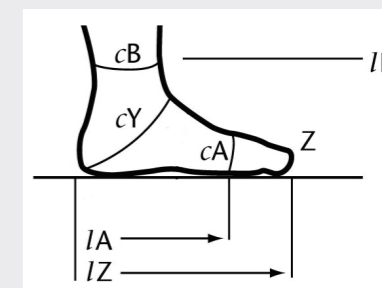

Videoklip og Måleskemaer findes på www.circaid.dk